




# MIXOMAT mini

Labormischer für Behältergrößen von 0,5 bis 2 Liter

## Gehäuse

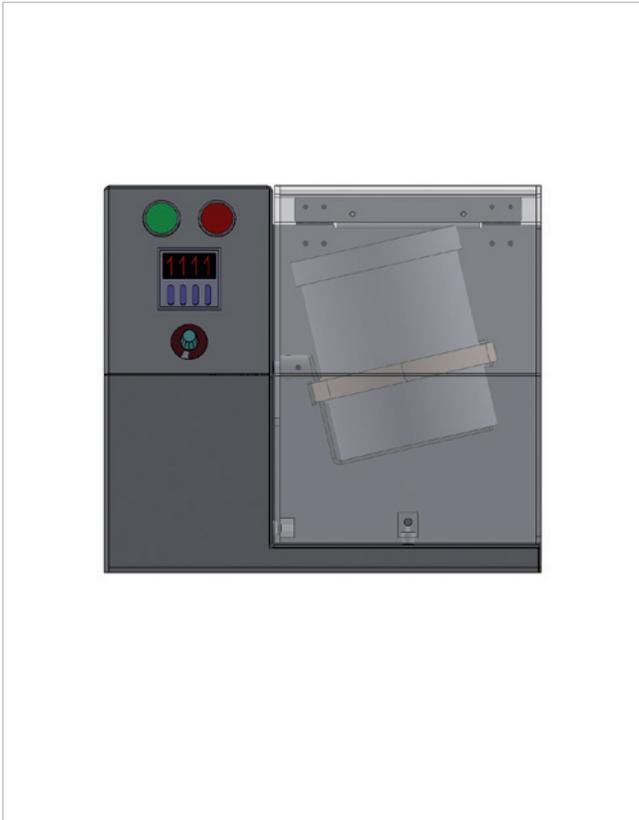


MIXOMAT mini



## Ausführung

- ✓ Robustes, kompaktes, formschönes Mischergehäuse mit integrierter Schutzhaube aus Plexiglas.
- ✓ Absicherung mittels berührungslosem Näherungsschalter, d.h. Mischvorgang kann nur gestartet werden bei verschlossener Haube.
- ✓ Mischergehäuse und Behälterhalterung komplett in Edelstahl 1.4301
- ✓ Oberfläche ist poliert
- ✓ Geeignet für Mischbehälter von 0,5 bis 2,0 Liter (Behälterhalterung ist regulierbar mittels einstellbarem Klettverschluss)
- ✓ Steuerung mit Zeitschaltuhr
- ✓ Digital 2-zeilig mit eingestellter und verbleibender Mischzeit, einstellbar von 1s bis 999 h und mit Drehzahlregulierung (von 0-47 U/min.)
- ✓ Mit starkem Gleichstrom-Getriebemotor (Drehmoment: 2 Nm)
- ✓ Für max. Nutzlast von: 2.000 g
- ✓ Für Schüttgüter mit einem max. Schüttgewicht 2 kg/l
- ✓ Anschluss: 1-phasig 230V
- ✓ wahlweise mit CH- oder EU-Stecker
- ✓ Lieferung mit: je ein Behälter aus PP weiss 0,5, 1,0 und 2 Liter mit Schraubverschluss;
- ✓ ohne Verengung am Gewinderand

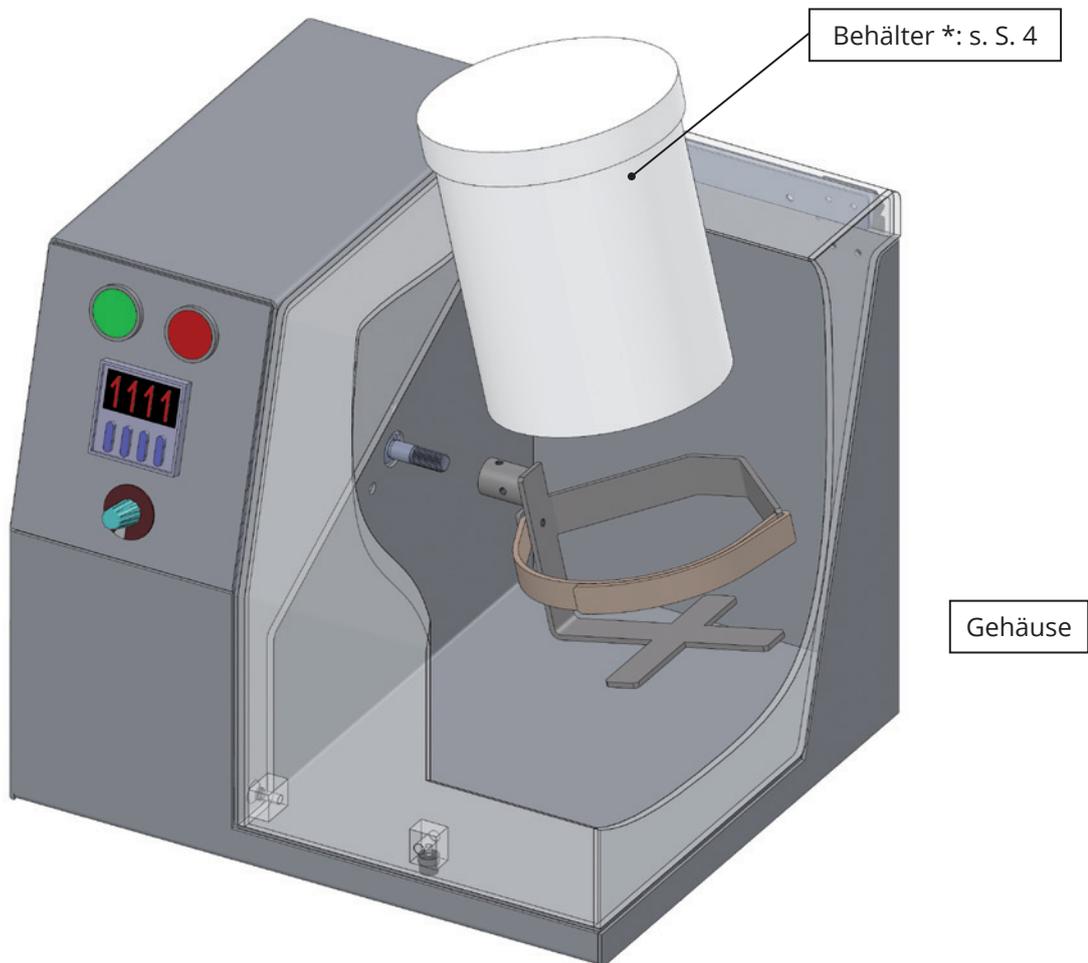

# MIXOMAT mini

## Behälter

Standardmässig sind von **FUCHS** folgende Behälter erhältlich:

### Behälter in Kunststoff



#### Ausführung:

✓ 0.5-2 l    PP, weiss

Behälter Kunststoff, 0.5-2 l

### Behältergrössen MIXOMAT mini

V [l]	Material	D [mm]	H [mm]	Behälter Art.-Nr.
0,5	PP	90	87	M-M-0035
1	PP	110	122	M-M-0037
2	PP	130	167	M-M-0039



Stand: 2018-03

**FUCHS Maschinen AG**  
Englisberg 17  
1763 Granges-Paccot (Schweiz)  
Tel: +41 26 510 10 00  
[info@fuchsag.com](mailto:info@fuchsag.com)  
[www.fuchsag.com](http://www.fuchsag.com)